


CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSA (HPV) PARAUGA PAŅEMŠANAS INSTRUKCIJA

1. Noslaukiet liekās gļotas un asinis no dzemdes kakla ar vates tamponu un viegli ievietojiet birstītes centrālo daļu dzemdes kakla kanālā, lai īsākie sariņi varētu pilnībā kontaktēties ar dzemdes kaklu.
2. Birstīti ļoti viegli spiediet uz priekšu un pagrieziet to 5 reizes vienā virzienā. Nekad negrieziet birstīti uz priekšu un atpakaļ!!!
3. Ievietojiet birstītes galvu konservēšanas šķīdumā savākšanas konteinerā - Cell Preservative Solution, Sure Path vai analogā.
4. Norādiet pacienta identifikāciju (vārds/uzvārds/personas kods/datums/nosūtījuma numurs) uz konteineru un nosūtiet uz MFD laboratoriju.

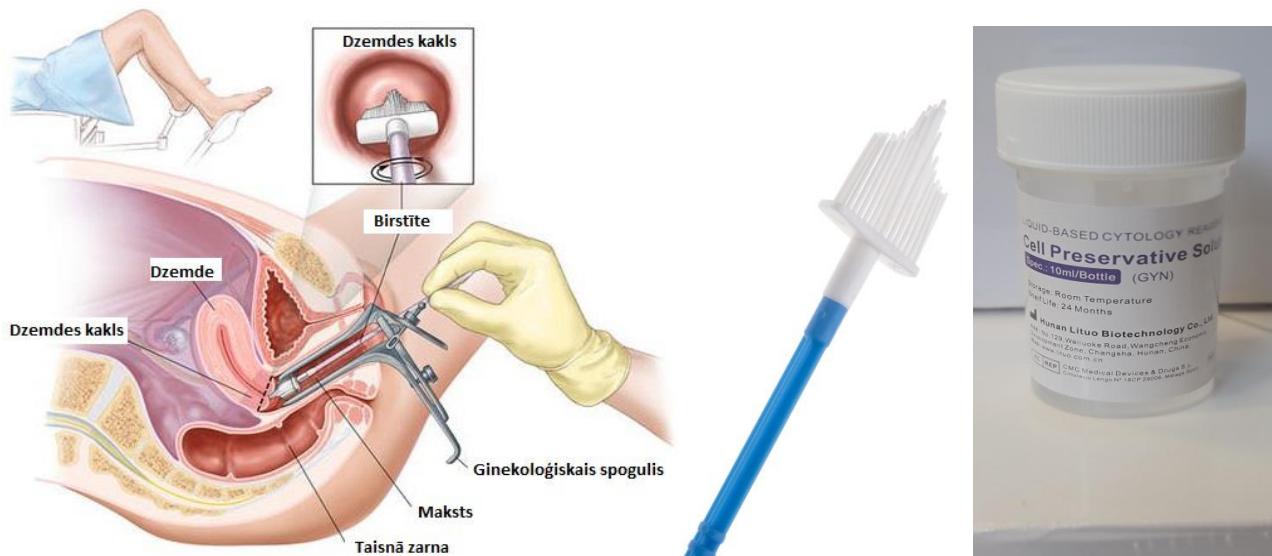

3. Piezīmes:

- Cik vien iespējams, izvairieties no paraugu savākšanas menstruāciju laikā un 24 stundas pēc zāļu lietošanas;
- Ja ir daudz gļotu un asiņu, pirms parauga ņemšanas noslaukiet gļotas un asinis ar vates tamponu (vajadzības gadījumā atkārtojiet 2-3 reizes); Ja ir daudz gļotu, bet ļoti mazs epitēlija šūnu, paraugi nav kvalificējami un paraugs jāiegūst no jauna.
- Materiālu ņemiet ļoti rūpīgi, lai pārliccinātos, ka birstīte ir pietiekams spiediens uz ņemšanas virsmu.
- Birstītes centrālos sariņus ievietojiet dzemdes kakla kanālā tā, lai abas puses atrodas tuvu dzemdes kakla kanāla ārējai mutei. Tādējādi no dzemdes kakla kanāla var paņemt pēc iespējas vairāk šūnu.
- Ja paraugu ņemšanas laikā ir acīmredzama dzemdes kakla asiņošana, paraugu ņemšana nekavējoties jāpārtrauc.
- Normālos apstākļos mēģiniet izvairīties no atkārtotas paraugu ņemšanas īsā laika posmā, lai izvairītos no kļūdaini negatīviem rezultātiem.
- Nosūtījuma veidlapu aizpildiet cik vien iespējams pilnīgāk, un sniedziet pēc iespējas vairāk būtisku klinisko informāciju.